

SV Blephaclean

Vårservert med rengöringslotion för daglig rengöring av ögonlock och huden runt ögonen.

Beskrivning:

20 sterila våtservetter med rengöringslotion för engångsbruk, färdiga att använda. Produkten är fri från konserveringsmedel och parfym. Endast för applicering på huden.


Användningsområde:

BLEPHACLEAN kan används för daglig rengöring av ögonlock, ögonfransar och den känsliga huden runt ögonen. BLEPHACLEAN rengör utan att orsaka irritation i ögonen eller på huden. BLEPHACLEAN fungerar återfuktande och mjukar dessutom upp huden. BLEPHACLEAN innehåller bl.a. hyaluronsyra, Iris florentina och Centella asiatica. BLEPHACLEAN kan rekommenderas till personer som bär kontaktlinser.

Bruksanvisning:


1. Rengöring av ögonlock, ögonfransar och huden runt ögonen:

Öppna påsen och ta ut våtservetten. Stäng ögonlocket och applicera våtservetten försiktigt på ögonlocket och ögonfransen. Massera försiktigt ögonlocket med små cirkulära rörelser och ta försiktigt bort eventuella rester av sekret och skorpbildningar.

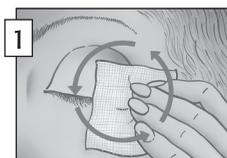

2. Rengöring av kanten på det nedre ögonlocket:

Gör detta framför en spegel, öppna ögonlocket genom att försiktigt föra ögonfransarna nedåt. Rulla ihop våtservetten till en avlång stav och torka mycket försiktigt på den nedre ögonlockskanten. Undvik att komma i kontakt med själva ögongloben.

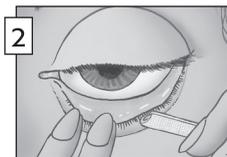

Upprepa rengöringen på det andra ögat men använd då en ny våtservert. Ögonlocket behöver inte tvättas av med vatten efteråt. Använd BLEPHACLEAN två gånger per dag, morgon och kväll.

Observera:

Användningsområde är huden runt ögonen. Får inte appliceras direkt i ögat. Förvaras utom räckhåll för barn.

FI Blephaclean

Puhdistusmaitoa sisältävä kosteuspyyhe silmäluomien ja silmien ympäräsalueen ihon päivittäiseen puhdistukseen.

Kuvaus:

20 puhdistusmaitoa sisältävää käyttövalmistaa kertakäyttöistä steriiliä kosteuspyyhettä. Tuote ei sisällä säilytysaineita eikä hajusteita. Tarkoitettu vain iholle käytettäväksi.


Käyttötarkoitus:

BLEPHACLEAN-kosteuspyyhkeitä voidaan käyttää silmäluomien, silmäripsien ja herkün silmän ympäräsalueen ihon päivittäiseen puhdistukseen. BLEPHACLEAN puhdistaa ärsyttämättä silmiä tai ihoa. Samalla BLEPHACLEAN kosteuttaa ja pehmentää ihoa. BLEPHACLEAN sisältää mm. hyaluronihappoa, kurjenmiekkauutetta (*Iris florentina*) ja *Centella asiatica*-kasviuutetta. BLEPHACLEAN-kosteuspyyhkeitä voidaan suositella piilolasien käyttäjille.

Käyttöohje:


1. Silmäluomien, silmäripsien ja silmien ympäräsalueen ihon puhdistaminen:

Avaa pussi ja ota kosteuspyyhe esille. Sulje silmät ja pyyhi silmäluomia ja silmäripsiä varovasti kosteuspyyhkeellä. Hiero silmäluomea varovasti pienin pyörein liikkein puhdistaksesi silmästä mahdolliset eritteet ja karstan.

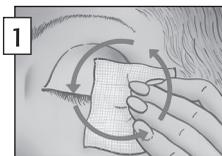

2. Silmän alaluomen reunan puhdistaminen:

Asetu peilin eteen ja avaa silmäluomea vetämällä silmäripsiä varovasti alaspäin. Kierrä kosteuspyyhe pitkänomaiseksi rullaksi ja pyyhi silmän alaluomen reunaa hyvin varovasti. Vältä koskettamasta kosteuspyyhkeellä silmään.

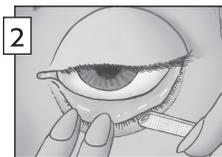

Puhdista toinen silmä uudella kosteuspyyhkeellä samalla tavoin. Silmäluomea ei tarvitse huuhtoa vedellä kosteuspyyhkeen käytön jälkeen. Käytä BLEPHACLEAN-kosteuspyyhkeitä kaksi kertaa päivässä, aamuisin ja iltaisin.

Huom!

Tarkoitettu käytettäväksi silmien ympäräsalueen iholle. Ei saa käyttää suoraan silmään. Ei lasten ulottuville.

DA NO Blephaclean

Vådserviet med renselotion til daglig afrensning / rensing af øjenlåg og huden omkring øjnene.

Beskrivelse:

20 sterile vådservietter med renselotion til engangsbrug, lige / klare til at anvende / bruge. Produktet er uden konserveringsmidler og parfume. Kun til anvendelse på huden.


Anvendelsesområde:

BLEPHACLEAN kan anvendes til daglig afrensning / rensing af øjenlåg, øjenvipper og den sarte / sensitive hud / huden omkring øjnene. BLEPHACLEAN renser uden at forårsage irritation i øjnene eller på huden. BLEPHACLEAN er fugtende og blødgør derudover / i tillegg huden. BLEPHACLEAN indeholder bl.a. hyaluronsyre, iris florentina og Centella asiatica. BLEPHACLEAN kan anbefales til personer, som bærer kontaktlinser.

Bruksanvisning:


1. Afrensning / rensing af øjenlåg, øjenvipper og huden omkring øjnene:

Åbn / åpne posen og tag vådservietten ud. Luk øjenlåget og læg vådservietten forsigtigt på øjenlåget og øjenvipperne. Masser varsomt øjenlåget med små cirkulære bevægelser og fjern forsigtigt eventuelle rester af sekret eller skorpedannelser.

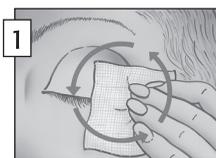

2. Rengöring af kanten på det nedre øjenlåg:

Stå foran et spejl, åben øjenlåget ved forsigtigt at trække øjenvipperne nedad. Rul vådservietten til en aflang / avlang stav og tør / tørk meget forsigtigt på den nedre øjenlågskant. Undgå at komme i kontakt med selve øjenæblet / øyeeplet.

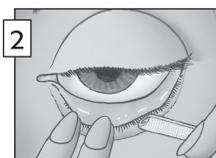

Gentag afrensningen / rensingen på det andet øje, men anvend / bruk en ny vådserviet. Øjenlåget behøver ikke at blive skyllet med vand efterfølgende / etterpå. Anvend BLEPHACLEAN to gange om dagen, morgen og aften.

Bemærk:

Produktet skal benyttes på huden omkring øjnene. Må ikke anvendes direkte i øjet. Opbevares utilgængeligt for børn.

IS Blephaclean

Blautþurrka með hreinsivökva til daglegrar hreinsunar á augnlokum og húðinni í kringum augun.

Lýsing:

20 dauðhreinsaðar einnota blautþurrkur með hreinsivökva, tilbúnar til notkunar.

Varan inniheldur hvorki rotvarnar- né ilmefni. Aðeins til notkunar á húð.


Notkunarsvæði:

BLEPHACLEAN má nota til daglegrar hreinsunar á augnlokum, augnhárum og viðkvæmri húð í kringum augun. BLEPHACLEAN hreinsar án þess að valda ertingu í auganu eða húðinni. BLEPHACLEAN gefur raka og mýkir húðina. BLEPHACLEAN inniheldur m.a. hýalúronsýru, Iris florentina og Centella asiatica. BLEPHACLEAN hentar einnig einstaklingum sem nota snertilinsur.

Notkunarleiðbeiningar:

1. Til að hreinsa augnlok, augnhár og húðina í kringum augun:

Opnið pokann og takið blautþurrkuna út. Lokið auganu og þurrkið augnlokið og augnhárin varlega með blautþurrkunni. Nuddið augnlokið varlega með litlum hringhreyfingum og fjarlægjið varlega hugsanlegar leifar af slími og skorpu.

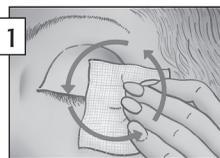

2. Til að hreinsa brún neðra augnloks:

Gerðið þetta fyrir framan spegil, opnið augnlokið með því að færa augnhárin varlega niður. Rúllið blautþurrkunni upp í lengju og þurrkið brún neðra augnloksins mjög varlega. Forðist að snerta augað sjálf.



Hreinsið síðan hitt augað með nýrri blautþurrku. Ekki þarf að þvo augnlokið með vatni að þessu loknu. Notið BLEPHACLEAN tvisvar á dag, að morgni og kvöldi.

Athugið:

Notkunarsvæðið er húðin í kringum augun. Má ekki setja beint í augun. Geymið þar sem börn ná ekki til.

Ingrediensir / Ainesosat / Innihaldsefni:

Aqua, PEG-8, Poloxamer 184, Polysorbate 20, Capryloyl Glycine, Propylene Glycol, PEG-6 Caprylic / Capric Glycerides, Dipotassium Phosphate, Alcohol, Sodium Hydroxide, Potassium Phosphate, Centella asiatica extract, Iris florentina root, Zinc Sulfate, Retinol, Sodium Hyaluronate.

Tillverkare / Valmistaja / Fabrikant / Framleiðandi:

LABORATOIRES THEA

12, rue Louis Blériot

63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

FRANKRIKE / RANSKA / FRAKKLAND

Tél.: +33 (0)4 73 98 14 36